


32寸/43寸/50寸/55寸/60寸/65寸 液晶智能电视一体机说明书

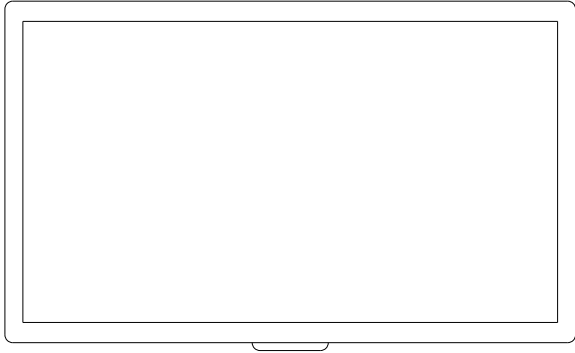

欢迎选用我公司的液晶智能电视一体机产品！

BC260L32/BC260L43/BC260L50/BC260L55/BC260L60/BC260L65
产品采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的SMT工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验，具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的医护产品。

可输入新的时间间隔，点击【确定】后即可保存。

八、系统重置

系统重置功能会将系统设置里的所有设置恢复为默认设置。点击【重置所有配置】的设置项，在对话框中点击【确认】按钮即可，点击【取消】返回。

九、系统版本

点击系统设置的【关于】设置项，可显示系统版本信息。

十、退出系统设置

点击系统设置的【退出】即可关闭系统设置功能，返回待机界面。

十一、技术参数

产品型号	整机尺寸
BC260L32	741.5*437.8*45.72mm
BC260L43	983.2*571.9*45.72mm
BC260L50	1140*660.6*45.72mm
BC260L55	1252.7*724.4*45.72mm
BC260L60	1314*765.4*45.72mm
BC260L65	1472.5*847.4*45.72mm

电源要求：100~240V, 50/60Hz；整机功耗：≤145W；工作温度：0℃~40℃；
工作湿度：10%~90%无凝结；联网接口：RJ45；安装方式：壁挂式。

十三、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	名称	数量	备注
1	液晶智能电视一体机	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	红外遥控器	1个	
5	配件包	1套	配件包单独包装，内含：挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同，以实物为准。

二、产品快速设置

设备出厂后，需手动设置设备编号和IP地址才能正常使用，设备编号和IP地址可以在分诊管理系统中查询。温馨提示：为便于操作，请在设备的USB口插上鼠标进行同操作。初次运行界面如下图：输入初始密码：071419，点击【进入】按钮。进入设置界面，点击“设备标识符”设置项，输入查询到的设备标识符，点击【确定】保存设置。点击【配置服务器IP】设置项，输入服务器的IP地址，点击【确定】按钮保存设置。最后点击鼠标右键两次返回到安卓系统界面上，并手动运行“医院分诊排队叫号系统”APP即可完成设置。

三、系统设置

更改设备的系统设置需插上鼠标，按下鼠标滚键打开密码输入界面。

四、修改默认密码

在系统设置界面点击【修改密码】设置项，打开修改密码界面，输入旧密码（初始密码是071419）和两次新密码后即可修改系统密码。

五、修改服务器端口

在系统设置界面点击【服务器Port】设置项，打开服务器端口修改界面，输入新端口（默认端口是18088），点击【确定】按钮保存即可。

六、页面切换时间设置

页面切换时间指的是当一级屏的诊室列表页面超过一页时，切换到下一页的时间设置，在系统设置中点击【页面切换时长】设置项，输入新的时间（单位：毫秒），点击【确定】保存即可。

七、语音报号停留时间设置

语音报号停留时间是指报号之后系统停留的间隔，点击【语音播放停留时长】设置项，即

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	电源	不开机	检查电源是否正确连接
2	网络连接故障	信息发布不了	检查网线是否连接好 检查设备是否IP在线
3	音频故障	喇叭无声音	检查功放音量设置

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	